

# Simport<sup>®</sup>

Depuis 1975

Scientific inc.

# Simport

## Cassettes pour Imprimantes Primera<sup>®</sup>

Cassettes avec bande adhésive

### QuickLoad<sup>™</sup>



Disponible avec bande adhésive QuickLoad<sup>™</sup> ou en vrac.

[www.simport.com](http://www.simport.com)


# Cassettes pour imprimantes Primera®

Fabriquées en acétal


Les cassettes en plastique jetables permettent de maintenir les spécimens de tissus en place pendant la circulation et l'enrobage, ainsi que pendant le stockage. Moulées à partir d'un polymère spécial à haute densité, ces cassettes maintiennent les échantillons immergés en toute sécurité dans le liquide et résistent à l'action chimique de la plupart des solvants histologiques. **Les fentes d'écoulement efficaces maximisent l'échange de fluide et assurent un drainage adéquat.** Selon les besoins, ils peuvent être ouverts ou fermés et ils se verrouillent toujours en toute sécurité sans risque de perte d'échantillon. Disponible en 11 couleurs.

**Spécialement conçu pour l'automatisation et imprimantes à cassette Primera manuelles.**


## HISTOSETTE II®

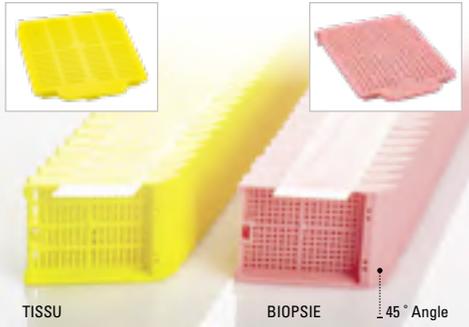

## UNISLETTE™ II

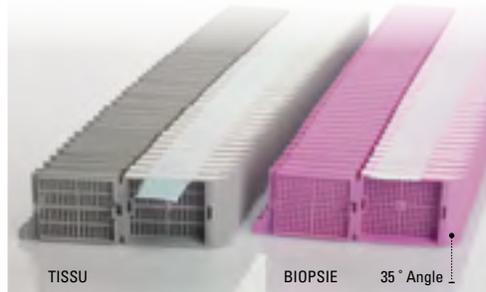

## SLIMSETTE™ II

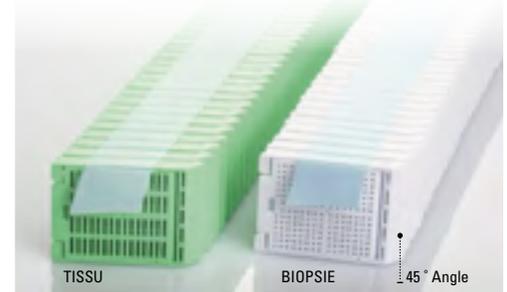

**Imprimante à alimentation automatisée**  
40 piles de 50 Cassettes  
bandes adhésives  
Caisse 2000

**Imprimante manuelle**  
Cassette individuelle  
2 boîtes distributrices de  
500 cassettes  
et 1 boîte distributrice de  
1000 couvercles / Caisse 1000

TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	Couleur
M385-2T	M386-2T	M385-2	M386-2	Blanc
M385-3T	M386-3T	M385-3	M386-3	Rose
M385-4T	M386-4T	M385-4	M386-4	Vert
M385-5T	M386-5T	M385-5	M386-5	Jaune
M385-6T	M386-6T	M385-6	M386-6	Bleu
M385-7T	M386-7T	M385-7	M386-7	Pêche
M385-8T	M386-8T	M385-8	M386-8	Tan
M385-9T	M386-9T	M385-9	M386-9	Gris
M385-10T	M386-10T	M385-10	M386-10	Lilas
M385-11T	M386-11T	M385-11	M386-11	Orange
M385-12T	M386-12T	M385-12	M386-12	Aqua

**Imprimante à alimentation automatisée**  
40 piles de 50 Cassettes  
bandes adhésives  
Caisse 2000

**Imprimante manuelle**  
Cassette individuelle  
2 boîtes distributrices de  
500 cassettes  
et 1 boîte distributrice de  
1000 couvercles / Caisse 1000

TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	Couleur
M405-2T	M406-2T	M405-2	M406-2	Blanc
M405-3T	M406-3T	M405-3	M406-3	Rose
M405-4T	M406-4T	M405-4	M406-4	Vert
M405-5T	M406-5T	M405-5	M406-5	Jaune
M405-6T	M406-6T	M405-6	M406-6	Bleu
M405-7T	M406-7T	M405-7	M406-7	Pêche
M405-8T	M406-8T	M405-8	M406-8	Tan
M405-9T	M406-9T	M405-9	M406-9	Gris
M405-10T	M406-10T	M405-10	M406-10	Lilas
M405-11T	M406-11T	M405-11	M406-11	Orange
M405-12T	M406-12T	M405-12	M406-12	Aqua

**Imprimante à alimentation automatisée**  
40 piles de 50 Cassettes  
Caisse 2000

**Imprimante manuelle**  
Cassette individuelle  
2 boîtes distributrices de  
500 cassettes  
et 1 boîte distributrice de  
1000 couvercles / Caisse 1000

TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	TISSU Produit #	BIOPSIE Produit #	Couleur
M409-2T	M410-2T	M409-2	M410-2	Blanc
M409-3T	M410-3T	M409-3	M410-3	Rose
M409-4T	M410-4T	M409-4	M410-4	Vert
M409-5T	M410-5T	M409-5	M410-5	Jaune
M409-6T	M410-6T	M409-6	M410-6	Bleu
M409-7T	M410-7T	M409-7	M410-7	Pêche
M409-8T	M410-8T	M409-8	M410-8	Tan
M409-9T	M410-9T	M409-9	M410-9	Gris
M409-10T	M410-10T	M409-10	M410-10	Lilas
M409-11T	M410-11T	M409-11	M410-11	Orange
M409-12T	M410-12T	M409-12	M410-12	Aqua

# M407 MICROMESH™ pour imprimante Primera®

Fabriquées en acétal

Le MICROMESH™ offre 1676 ouvertures carrées (0,38 mm) permettant un échange de fluide grandement amélioré sans avoir à utiliser des tampons de biopsie. Les grandes fentes antérieures et postérieures de la cassette et du couvercle garantissent que la cassette de biopsie MICROMESH™ s'enfonce rapidement. Un grand compartiment carré avec un côté de 27 mm est parfait même pour les biopsies à l'aiguille. Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet de gagner de la place.


Moulées à partir d'un polymère spécial à haute densité, ces cassettes maintiennent les échantillons immergés en toute sécurité dans le liquide et sont totalement résistantes à l'action chimique de la plupart des solvants histologiques. La maille MICROMESH™ assure un échange de fluide et un drainage efficaces.

Le couvercle monobloc intégré élimine le besoin de couvercles en acier séparés.

Ils peuvent être ouverts et fermés et toujours se verrouillent en toute sécurité sans risque de perte d'échantillon. La zone d'écriture antérieure est à un angle de 45°.

## Anatomie des cassettes Micromesh™

Un couvercle encastré est une excellente fonction d'économie d'espace, permettant d'empiler plus de cassettes dans les imprimantes automatisées et les tiroirs d'entreposage.

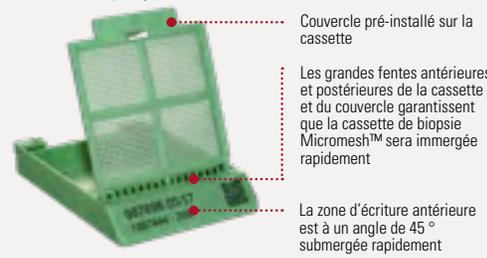

Cassette individuelle pour imprimante à alimentation manuelle

QuickLoad™ Bandes de cassettes pour imprimante automatisée



## M407/M407T MICROMESH™

Cassette individuelle pour imprimante à alimentation manuelle 4 distributeur boîtes de 250 / Caisse 1000

QuickLoad™ pour Bandes de cassettes pour imprimante automatisée 50 bandes adhésives / Caisse 2000

Produit #	Produit #	Couleur
M407-2	M407-2T	Blanc
M407-3	M407-3T	Rose
M407-4	M407-4T	Vert
M407-5	M407-5T	Jaune
M407-6	M407-6T	Bleu
M407-7	M407-7T	Pêche
M407-8	M407-8T	Tan
M407-9	M407-9T	Gris
M407-10	M407-10T	Lilas
M407-11	M407-11T	Orange
M407-12	M407-12T	Aqua

Primera® est une marque déposée de Primera Technology Incorporated



2588 Bernard-Pilon  
Beloeil, Québec  
J3G 4S5  
Canada

T-450 464-1723  
F-450 464-3394  
info@simport.com  
www.simport.com