


R225

Gamme de réservoirs de réactifs

Simport

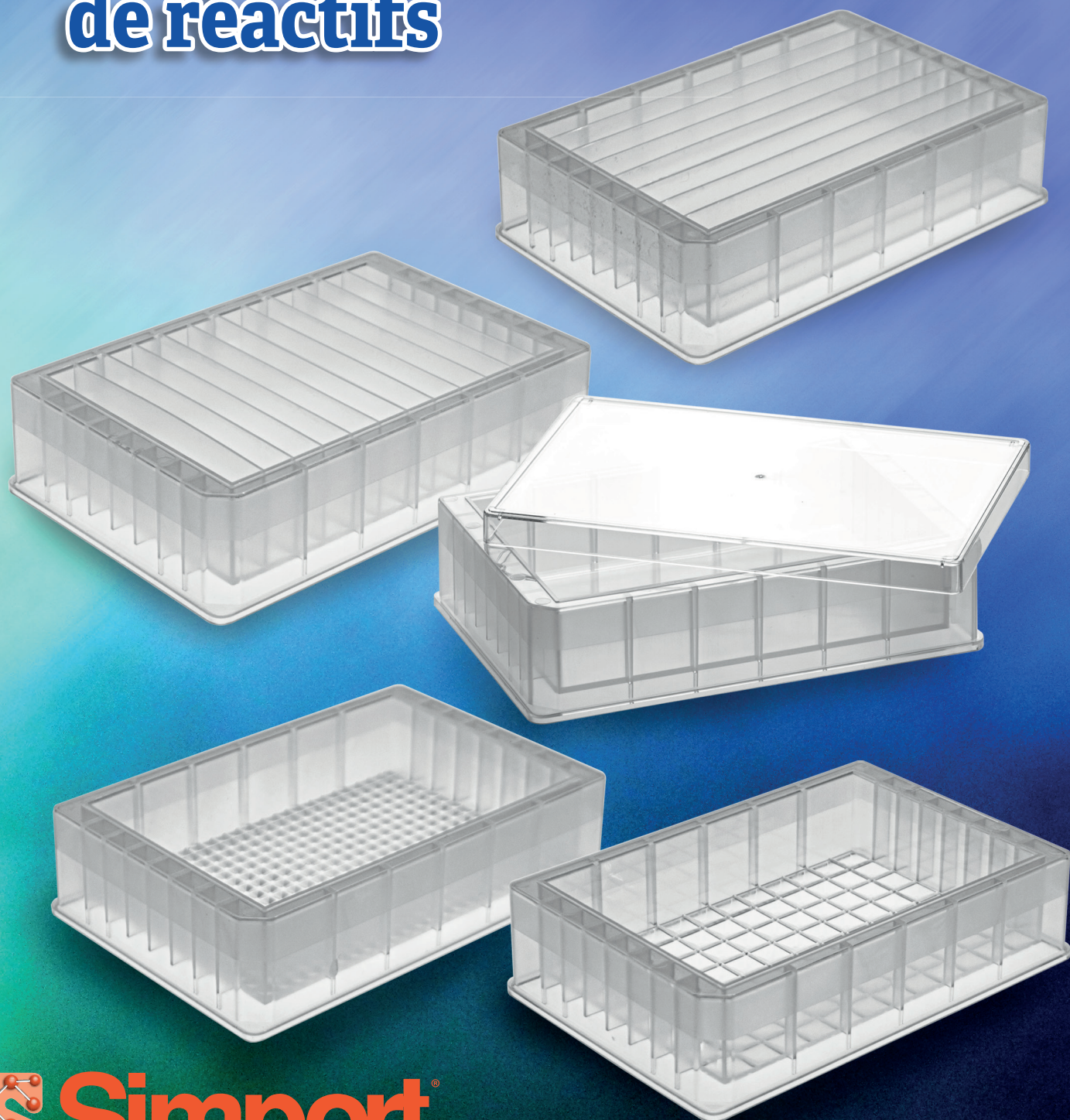

Simport
Scientific inc.

Depuis 1975

Une entreprise  familiale Canadienne

simport.com

Réserveur de réactifs pour automation

Emballage : Qté/Pqt 10 - Qté/Cs 50

Fabriquée en polypropylène

Pour les laboratoires qui procèdent à la collecte de fractions, au stockage de composés, à la réplique de plaques et aux applications de mélange. Convient pour une gamme de configurations de manipulation de liquide de 8 ou 12 canaux ou pour 96 et 384 puits. Idéal pour les embouts robotiques de petit volume utilisés dans les instruments de criblage à haut débit. Choisissez parmi un seul réservoir ou des modèles partitionnés pour plusieurs liquides.

Conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS, ils sont compatibles avec pratiquement toutes les procédures manuelles, ou avec les pipetteurs de liquides automatisés.

Fabriquée de polypropylène vierge naturel, offrant une faible adhésion, empêchant les échantillons d'adhérer sur les parois pendant l'élution. Chimiquement inerte pour les applications de chimie combinatoire.


Caractéristiques

- Conçu pour les systèmes automatisés, offre une manipulation simple et économique des réactifs
- Fond conçu pour la canalisation du liquide, maximisant la récupération des réactifs avec pipettes
- À profil-bas
- Résistant aux produits chimiques et peut être entreposé à des températures jusqu'à -80 °C
- Autoclavable
- Le couvercle ne peut pas aller dans l'autoclave
- Peut être irradié par rayons gamma
- Certifié DNase/RNase et sans pyrogène

Couvercle





No Cat. **R225-15**
Matériau Polystyrène de grade medical
Format mm 127,8 x 85 x 9
Qté/Pqt 10
Qté/Cs 300

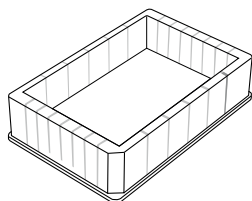



1 Réservoir

No Cat. **R225-1**
Volume 190 ml
Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4

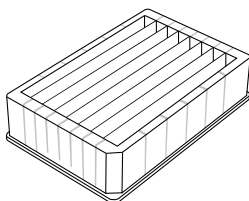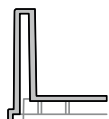



8 Réservoirs

No Cat. **R225-3**
Total Volume 180 ml
Par réservoir 22 ml
Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4

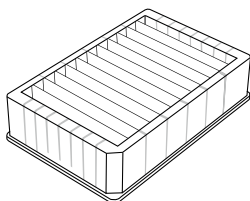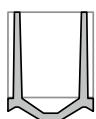


12 Réservoirs

No Cat. **R225-5**
Total Volume 180 ml
Par réservoir 15 ml
Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4

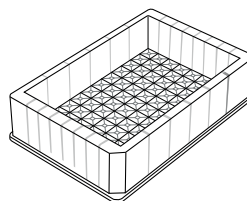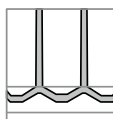

96 Réservoirs

No Cat. **R225-7**
Volume 195 ml
Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4

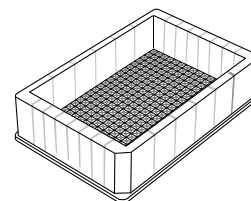

384 Réservoirs

No Cat. **R225-9**
Volume 185 ml
Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4

